

ハウリングがしていたら、止めよう！止めてあげよう！

子どもたちの中に、補聴器から「ピー」と音が出ている子はいませんか？

これは、「ハウリングしている」といいます。「ピー」という音が出ているときは、声がきれいに聞こえない状態になっています。

ハウリングがしている状態は、

聴力のよい子どもたちであれば、「ピーッと鳴っている」「うるさい」と自分で訴えることもできますが、聴力の厳しい子どもたちは気がつかない場合も多いようです。

本人が気がつかない場合には、ハウリングが止まるように、周囲の聞こえる者が対処してあげる

(教えてあげる・耳に入れ直してあげる・ハウリングを止めるような調整・修正をしたり、そのためのアドバイスをしてあげる) ことが肝心です。

★ハウリングに気がついたときは、下の1から4までを順に疑ってみて、すぐに対処しましょう。

ハウリングするのは
どんなときでしょう？

どのように
対処する？

1 イヤモールドがしっかりと耳に入っていない。はずれかかっているとき。



「ピー」と鳴っていることを教えてあげます。入れ直してあげます。

2 ボリュームを通常の設定より上げすぎているとき。



ボリュームを確かめます。正しいボリュームにします。

3 補聴器の故障やイヤモールド、フック、チューブのどこかに異常があるとき。



イヤモールドの音孔を指でふさいでも、「ピー」と鳴っていれば、何らかの故障か異常です。聴能担当に相談しましょう。(自活だよりNo.4を参照してください。)

4 イヤモールドがゆるく、耳に合わなくなったとき。



イヤモールドを作り直します。

イヤモールドには、固いタイプの「ハード」や、やわらかいタイプの「ソフト」といった材質のもの一般的に使われます。

小さいお子さんは、外からの衝撃で耳の中をケガすることも考慮し、一般的に「ソフト」で作成し

ます。高等部の生徒では、「ハード」も使用しています。

ハウリングが止まらない場合は、ハウリングしにくい「サーモソフト」という素材を選定してみると良いと思われます。(裏面に紹介)

イヤモールドのできあがりまでの待ち期間は、1週間程度必要となります。その間の応急のハウリング防止処置として二つの方法がとれます。

★イヤモールドの表面に上塗り剤を塗ることで、全体的にイヤモールドを大きくします。

★ハウリング抑制ジェルを用います。スキンクリームのようなもので、イヤモールドと外耳道の透き間を埋めます。

こうした処置は、新しいイヤモールドができてくるまでの、一時的にハウリングを防止する処置と考えたほうがよいでしょう。

ハウリング抑制ジェル
「オーラゲル」
1,260円



コンチャ(点の部分)にジェルをぬり、イヤモールドをはめます。

イヤモールドをつくるときは…?

★カラーイヤモールドの作成が可能です。

赤、青、水色、黄色、緑、ピンク、紫など好みの色が着色できます。微妙な色の指定は難しいようです。


補聴器も、デザインが重視され、カラフルなものが増えました。補聴器の着せ替えは、なかなか難しくても、イヤモールドの色合いには、こだわってみてはいかがでしょうか。

作成時期で、色を変えることで、新旧の見分けにも便利です。

※半年くらいの使用で、だんだん色が薄くなってきます。原因は体温と汗によるようです。

※アトピーの方には、黒（炭）というのが良いということも知っていましたか。

★キラキラ光る、「ラメ入り」加工もできます。

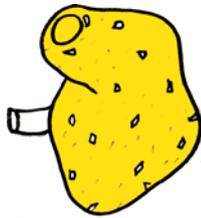

★シールやビーズが封入できます。

御家庭からお持ち頂いたシールなどをコンチャの部分に封入できます。

絵柄を変えると、左右の見分けに便利です。

封入できる大きさは、5 mm × 7 mm程度の大きさを目安にしてください。




※テレビ番組等のキャラクターシールは、コピー品は使用できません。購入したものをお渡しください。


サーモソフト

この素材の特徴は、体温を感じて軟化し、肌になじむというものです。「サーモソフト」のイヤモールドをしばらく握っていると分かるのですが、柔らかくなってきます。

体温によって素材が柔らかくなり、少し膨張し（1～2%程度）、外耳道の皮膚との密着度が高まります。耐久性はあまりよくありませんが、この密着性が、ハウリング防止効果と装着感を向上させます。

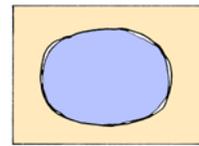

体温で温まると…

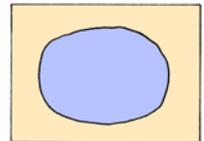

本の紹介

『耳の聞こえない子がわたります』

マーリー・マトリン 作

日当陽子 訳

フレーベル館

定価 1,400円+税

この夏に発刊された児童書です。

内気な少女シンディが引っ越した街には、耳の聞こえない少女ミーガンが住んでいました…。アメリカの日常生活を背景に、二人の少女の友情のお話です。

子どもだけでなく、親も読んでみるとよい本です。

作者のマーリー・マトリンさんは、映画『愛は静けさの中に』（1986）で、アカデミー主演女優賞を受賞した聾者。彼女自身の体験を交えて描かれています。



補聴器電池の共同購入

3学期の開始に合わせて、補聴器電池の共同購入を行います。新学期に配布する用紙にて、お申し込みください。今回は、1パック（6個入り）が320円と、お安く購入可能になっています。